


ETHNOCARE

Redefine people's mobility

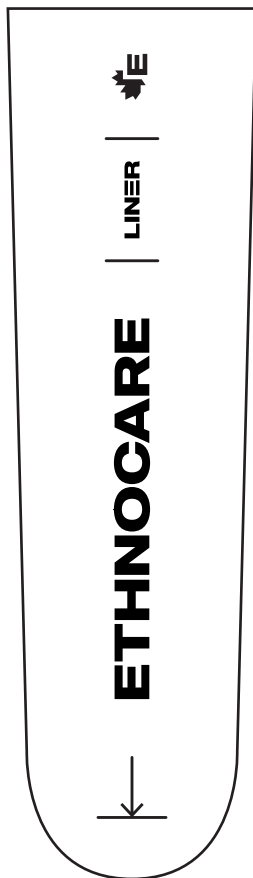

Instructions for use

LINER

Fig. 1

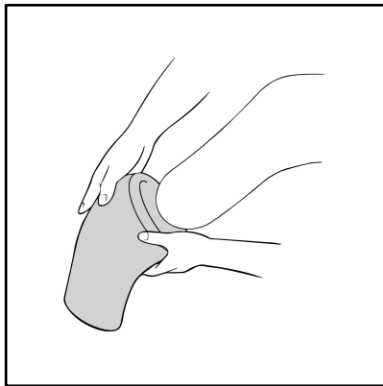


Fig. 2

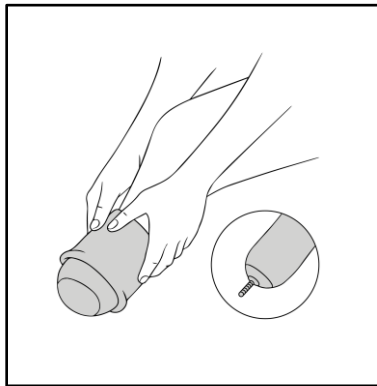


Fig. 3

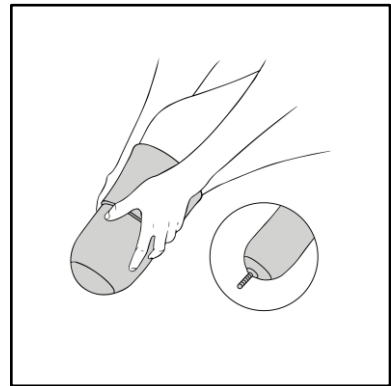


Fig. 4

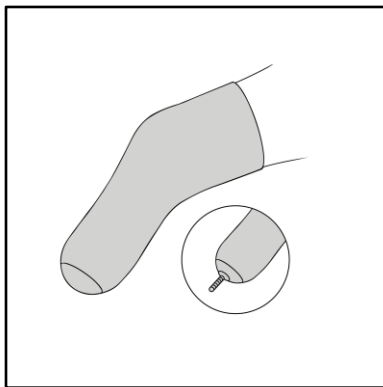


Fig. 5

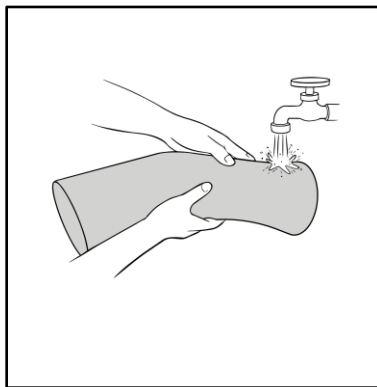


Fig. 6

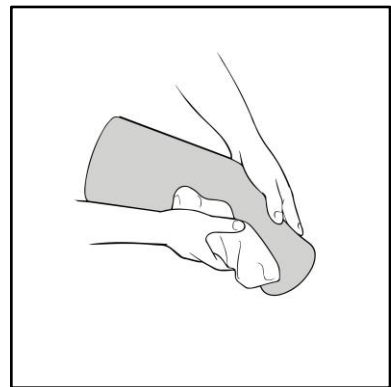


TABLE OF CONTENTS

English – p.3
Français – p.9

ENGLISH

READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY IN THEIR ENTIRETY BEFORE USING THE DEVICE AND OBSERVE THE SAFETY INSTRUCTIONS. CORRECT INSTALLATION IS ESSENTIAL FOR THE PROPER FUNCTIONING OF THE DEVICE.

DEVICE DESCRIPTION :

The device is a silicone liner worn over the residual limb to provide a comfortable and protective interface inside the prosthetic socket. It also helps secure the limb to the prosthesis.

There are two main types of liners:

1. Locking liner (-L-): Includes either a built-in or interchangeable distal attachment that connects directly to the prosthesis for suspension.
2. Cushion liner (-C-): Has no distal attachment and therefore requires the use of a separate suspension sleeve to create suction or vacuum and hold the prosthesis in place.

INTENDED USE :

The device is a prosthetic interface designed to help suspend and secure a lower-limb prosthesis. It is intended to be used as part of a complete prosthetic system after limb loss.

A qualified healthcare professional must evaluate whether this device is appropriate for the patient and the specific prosthesis. The device must be fitted and adjusted by a trained healthcare professional.

INFORMATIONS :

1. Please read this entire document carefully before using the device and follow the safety instructions.
2. A healthcare professional must instruct the patient or the caregiver how to use this device safely.
3. Contact the manufacturer, or your healthcare professional if you are a patient or a caregiver, if you have any questions about the device or if you experience any problems or complaints or incidents including any worsening medical conditions.
4. Please keep this document.

MATERIALS :

List of materials per Liner SKU

Liner SKUs	Material
LNR-SIL-L-3-XX-30	Medical Grade Silicone
LNR-SIL-C-3-XX-30	Medical Grade Silicone
LNR-SIL-L-6-XX-30	Medical Grade Silicone
LNR-SIL-C-6-XX-30	Medical Grade Silicone
LNR-SIL-L-3-XX-40	Medical Grade Silicone
LNR-SIL-C-3-XX-40	Medical Grade Silicone
LNR-TF-SIL-L-2-XX-40	Medical Grade Silicone
LNR-GEL-L-X-X-X	Thermoplastic Elastomer
LNR-GEL-C-X-X-X	Thermoplastic Elastomer

USE OF SYMBOLS

Symbols	Symbols titles	Explanatory text
	Country of manufacturing	Indicates the country of manufacturing
	Importer	Indicate the importer informations
	CE Mark	Indicate that the medical device is compatible with the European regulations.
	Packaging integrity	Indicates to not use the device if the packaging is damaged.
	Batch code	Indicates the manufacturer's batch code so that the batch or lot can be identified.
	Catalog #	Indicates the manufacturer's catalog # so that the medical device can be identified.
	Quantity	Indicates the # of units per package.
	Consult instructions for use	Indicates the need for the user to consult the instructions for use.
	Medical device	Indicates that the item is a medical device.
	Single patient - Multiple use	Indicates that the medical device can be used multiple times, but only on one patient.
	Caution	Indicates that caution is necessary when operating the device to avoid undesirable outcomes.

Symbols source : ISO 20417:2021

SAFETY INSTRUCTIONS:



If the device is too tight, it may cause blisters, pressure spots, or numbness.
If the device is too loose, it can cause friction, skin irritation, and increased sweating.



Check the device daily for wear and damage and have the prosthesis checked at least every 6 months, the patient should stop using the device and contact a healthcare professional if the device is damaged. We also strongly recommend wearing 2 devices in alternance.



Please do not leave the device in a hot place where temperatures may exceed 65°C for a long time period. Exposure to excessive heat may alter the material's stated hardness and properties.



Using a lower-limb prosthetic device involves a natural risk of falling, which may result in injury. The healthcare professional is responsible for reviewing this entire document with the patient and making sure the patient understands all safety information and instructions for proper use of the device.



The device must be kept free from foreign particles. Simply washing the device may not remove these contaminants. If the device comes into contact with any foreign substances or chemicals, stop using it and return it to your healthcare professional for evaluation.



This device is intended for use by one patient only and must not be shared.



Wearing time must be determined together with your clinician or doctor.



Do not wear the liner while sleeping.



Do not apply lotions, oils, or petroleum jelly (e.g., Vaseline) immediately before putting on the liner, as this can reduce adhesion and irritate the skin.



Always wear a residual limb/prosthetic sock over the liner to protect the outer fabric.
If your limb volume changes throughout the day, adjust by adding or removing socks.



Avoid damage to the liner caused by fingernails or sharp objects.
Ensure that the locking pin (if present) does not rub against the liner.



Examine your skin daily for irritation, redness, or injury.
Do not wear the liner if the skin is damaged.



This liner may be used with other prosthetic components only if they are properly selected and fitted by a qualified healthcare professional.

All serious incidents related to the device shall be reported to the manufacturer and the competent authority.

INSTRUCTIONS FOR USE:

Putting On the Device:

1. Ensure the residual limb is clean, dry, and free of any soap or lotion.
2. Turn the liner inside out (Fig.1).
3. Position the distal end of the liner directly against the end of the residual limb, making sure the locking pin (if present) aligns straight with the limb (Fig. 2).
4. Roll the liner up slowly and evenly toward the top of the limb (Fig. 3-4).
The printed logo/markings should face the front.
5. Check that no air pockets are trapped between the liner and the skin.

Taking Off the Device:

1. Roll the liner off gently from the top downward, do not pull it off.

The product is intended for use on one patient only and cannot be reused on another patient.

MAINTENANCE, CLEANING AND STORAGE INSTRUCTIONS:

Daily Cleaning

1. Wash the device with warm water and a pH-neutral cleanser (Fig. 5-6).
2. Gently clean the inside using a soft towel, do not scrub or rub (Fig. 6).
3. Rinse thoroughly with plenty of water (Fig. 5).
4. Pat dry with a clean towel and allow the liner to air dry completely before use.

Weekly Disinfection

1. Lightly moisten a soft cloth with a small amount of cleansing alcohol.
2. Wipe the inside of the liner gently.
3. Follow all safety instructions provided by the cleaning product manufacturer.

Do Not:

- Do not use chlorine bleach.
- Do not use solvents such as acetone, benzene, or similar chemicals.
- Do not iron.
- Do not wash or dry the liner in a washing machine or tumble dryer.

Storage

- To avoid creases and facilitate drying, the device is best stored standing on a liner stand.

COMBINATION WITH OTHER PRODUCTS

The device is intended to be used together with other components as part of a complete lower-limb prosthetic system. It must be combined with a custom-made, full-contact prosthetic socket and an appropriate suspension or locking system. If the device is used with a pin suspension system, it may only be combined with pins that have an M10 threaded connection. All components must be selected, fitted, and adjusted by a qualified healthcare professional.

CONTRAINDICATIONS

Use of the device may not be appropriate in the following situations:

1. When residual limb weight-bearing is not possible, or when there are painful or sensitive neuromas.
2. When there is knee joint instability.
3. With certain residual limb shapes, such as very short limbs, strongly conical shapes, or limbs with very thin distal soft tissue.
4. For patients who are unable to follow proper donning, cleaning, and hygiene instructions.
5. For very high-activity users (e.g., K4 level or individuals participating in impact or high-load sports), the increased mechanical stress may exceed the device's intended performance. Suitability must be evaluated by a healthcare professional on a case-by-case basis.

To consider while choosing the correct liner for the patient:

1. Softer material liners (LNR-SIL-L-3-XX-30, LNR-SIL-C-3-XX-30, LNR-SIL-L-6-XX-30, LNR-SIL-C-6-XX-30) must be only used with low activity level patients such as K1 and K2, healthcare professional must evaluate the use of the softer material liners for activity level patient K3 and K4 on case-by-case basis.
2. The transfemoral liners (LNR-TF-SIL-L-2-XX-40) are suited for patient having an activity level of K1 to K3.
3. Firmer material liners (LNR-SIL-L-3-XX-40, LNR-SIL-C-3-XX-40) can be used on every type of activity level patients.

5. **WASTE DISPOSAL :**

The product must be disposed of with household waste in accordance with national regulations.

6. **LEGAL INFORMATION**

All legal conditions are subject to the local and other applicable law and may vary accordingly.

Responsibility

The manufacturer accepts no liability for damages resulting from failure to comply with this document, in particular from improper uses, unintended uses, uses outside the devices specified use conditions or unauthorized modification of the device. The device must be maintained in accordance with the operating instructions. Abuse or improper use of the device may result in decreased functionality. The manufacturer cannot be held responsible for damage resulting from improper maintenance or caused by components not authorized by the manufacturer. The manufacturer's distribution company responsible in your country will provide you with further information on the conditions of the commercial guarantee.

Commercial Warranty

The manufacturer grants a commercial warranty for this device from the date of fitting. The warranty period is 6 months. The commercial warranty covers proven defects in material, workmanship or construction. These defects must be reported to the manufacturer within the period of validity of the commercial warranty. Further information on the warranty terms and conditions can be obtained from the manufacturing company.

Note: While all advanced techniques have been used to achieve the maximum level of compatibility of function, strength, durability and comfort, there is no guarantee that the use of this device will prevent injury.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT L'INTÉGRALITÉ DES PRÉSENTES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF ET RESPECTER LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.
UNE INSTALLATION CORRECTE EST ESSENTIELLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

DESCRIPTION DU DISPOSITIF

Le dispositif est un manchon en silicone porté sur le membre résiduel afin de fournir une interface confortable et protectrice à l'intérieur de l'emboîture prothétique. Il contribue également à la suspension et à la fixation du membre à la prothèse.

Il existe deux principaux types de manchons :

1. **Manchon avec verrouillage (-L-)** : comprend un système d'attache distale intégré ou interchangeable qui se connecte directement à la prothèse pour assurer la suspension.
2. **Manchon coussin (-C-)** : ne comporte pas d'attache distale et nécessite l'utilisation d'un manchon de suspension séparé afin de créer une succion ou un vide pour maintenir la prothèse en place.

UTILISATION PRÉVUE

Le dispositif est une interface prothétique conçue pour assurer la suspension et la fixation d'une prothèse de membre inférieur. Il est destiné à être utilisé dans le cadre d'un système prothétique complet après une amputation. Un professionnel de santé qualifié doit évaluer si ce dispositif est approprié pour le patient et pour la prothèse concernée. Le dispositif doit être ajusté et réglé par un professionnel de santé formé.

INFORMATIONS

1. Veuillez lire attentivement l'intégralité de ce document avant d'utiliser le dispositif et suivre les consignes de sécurité.
2. Un professionnel de santé doit expliquer au patient ou à l'aidant comment utiliser ce dispositif en toute sécurité.
3. Contactez le fabricant ou votre professionnel de santé, si vous êtes patient ou aidant, pour toute question concernant le dispositif ou en cas de problème, de plainte ou d'incident, y compris toute aggravation de l'état médical.
4. Veuillez conserver ce document.

MATERIAUX :

Liste des matériaux selon le code de sélection du manchon

Code de Manchons	Matériaux
LNR-SIL-L-3-XX-30	Silicone de Qualité Médicale
LNR-SIL-C-3-XX-30	Silicone de Qualité Médicale
LNR-SIL-L-6-XX-30	Silicone de Qualité Médicale
LNR-SIL-C-6-XX-30	Silicone de Qualité Médicale
LNR-SIL-L-3-XX-40	Silicone de Qualité Médicale
LNR-SIL-C-3-XX-40	Silicone de Qualité Médicale
LNR-TF-SIL-L-2-XX-40	Silicone de Qualité Médicale
LNR-GEL-L-X-X-X	Élastomère Thermoplastique
LNR-GEL-C-X-X-X	Élastomère Thermoplastique

UTILISATION DES SYMBOLES

Symboles	Titre des symboles	Text explicatif
	Pays de fabrication	Indique le pays de fabrication
	Importateur	Indique l'importateur
	Marquage CE	Indique que le dispositif médical est conforme à la réglementation européenne
	Intégrité de l'emballage	Indique de ne pas utiliser le dispositif si l'emballage est endommagé
	Code de lot	Indique le code de lot du fabricant afin d'identifier le lot ou la série
	N° de catalogue	Indique le numéro de catalogue du fabricant afin d'identifier le dispositif médical
	Quantité	Indique le nombre d'unités par emballage
	Consulter les instructions d'utilisation	Indique la nécessité pour l'utilisateur de consulter les instructions d'utilisation
	Dispositif médical	Indique que l'article est un dispositif médical
	Patient unique – Utilisation multiple	Indique que le dispositif médical peut être utilisé plusieurs fois, mais uniquement par un seul patient
	Attention	Indique qu'une attention particulière est requise lors de l'utilisation du dispositif afin d'éviter des résultats indésirables

Source des symboles : ISO 20417:202

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Si le dispositif est trop serré, il peut provoquer des ampoules, des points de pression ou des engourdissements. S'il est trop lâche, il peut provoquer des frottements, des irritations cutanées et une transpiration accrue.



Vérifiez quotidiennement l'état du dispositif (usure et dommages) et faites contrôler la prothèse au moins tous les 6 mois. En cas de dommage, le patient doit cesser l'utilisation du dispositif et contacter un professionnel de santé. Il est également fortement recommandé d'utiliser deux dispositifs en alternance.



Ne laissez pas le dispositif dans un environnement chaud où la température peut dépasser 65 °C pendant une période prolongée. Une exposition excessive à la chaleur peut modifier la dureté et les propriétés du matériau.



L'utilisation d'une prothèse de membre inférieur comporte un risque naturel de chute pouvant entraîner des blessures. Le professionnel de santé est responsable de revoir l'intégralité de ce document avec le patient et de s'assurer que celui-ci comprend toutes les informations de sécurité et les instructions d'utilisation.



Le dispositif doit être maintenu exempt de particules étrangères. Un simple lavage peut ne pas suffire à éliminer ces contaminants. Si le dispositif entre en contact avec des substances ou produits chimiques étrangers, cessez son utilisation et retournez-le à votre professionnel de santé pour évaluation.



Ce dispositif est destiné à un usage par un seul patient et ne doit pas être partagé.



La durée de port doit être déterminée en concertation avec votre clinicien ou votre médecin.



Ne portez pas le manchon pendant le sommeil.



N'appliquez pas de lotions, huiles ou gelées de pétrole (par ex. Vaseline) immédiatement avant de mettre le manchon, car cela peut réduire l'adhérence et irriter la peau.



N'appliquez pas de lotions, huiles ou gelées de pétrole (par ex. Vaseline) immédiatement avant de mettre le manchon, car cela peut réduire l'adhérence et irriter la peau.



Ce manchon ne peut être utilisé avec d'autres composants prothétiques que s'ils sont correctement sélectionnés et ajustés par un professionnel de santé qualifié.



Examinez quotidiennement votre peau afin de détecter toute irritation, rougeur ou blessure. Ne portez pas le manchon si la peau est lésée.

Tout incident grave lié au dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Mise en place du dispositif

1. Assurez-vous que le membre résiduel est propre, sec et exempt de savon ou de lotion.
2. Retournez le manchon à l'envers (Fig. 1).
3. Positionnez l'extrémité distale du manchon directement contre l'extrémité du membre résiduel, en veillant à ce que la goupille de verrouillage (si présente) soit alignée droit avec le membre (Fig. 2).
4. Déroulez lentement et uniformément le manchon vers le haut du membre (Fig. 3-4).
5. Le logo ou marquage imprimé doit être orienté vers l'avant.
6. Vérifiez qu'aucune poche d'air n'est emprisonnée entre le manchon et la peau.

Retrait du dispositif

1. Déroulez doucement le manchon du haut vers le bas, sans tirer dessus.

Le produit est destiné à un usage par un seul patient. Ne pas réutiliser pour un autre patient.

ENTRETIEN, NETTOYAGE ET STOCKAGE

Nettoyage quotidien

1. Lavez le dispositif à l'eau tiède avec un nettoyant au pH neutre (Fig. 5-6).
2. Nettoyez délicatement l'intérieur à l'aide d'une serviette douce, sans frotter ni récurer (Fig. 6).
3. Rincez abondamment à l'eau (Fig. 5).
4. Séchez en tamponnant avec une serviette propre et laissez le manchon sécher complètement à l'air libre avant utilisation.

Désinfection hebdomadaire

1. Humidifier légèrement un chiffon doux avec une petite quantité d'alcool nettoyant.
2. Essuyez délicatement l'intérieur du manchon.
3. Suivez toutes les consignes de sécurité fournies par le fabricant du produit de nettoyage.

Ne pas :

- Ne pas utiliser de solvants tels que l'acétone, le benzène ou des produits similaires.
- Ne pas repasser.
- Ne pas laver ni sécher le manchon en machine ou au sèche-linge.

Stockage

- Afin d'éviter les plis et de faciliter le séchage, il est recommandé de stocker le dispositif en position verticale sur un support pour manchon.

ASSOCIATION AVEC D'AUTRES PRODUITS

Le dispositif est destiné à être utilisé avec d'autres composants dans le cadre d'un système prothétique complet de membre inférieur. Il doit être associé à une emboîture prothétique sur mesure à contact total ainsi qu'à un système de suspension ou de verrouillage approprié. Lorsqu'il est utilisé avec un système de suspension à goupille, il ne peut être combiné qu'avec des goupilles dotées d'un filetage M10. Tous les composants doivent être sélectionnés, ajustés et réglés par un professionnel de santé qualifié.

CONTRE-INDICATIONS

L'utilisation du dispositif peut ne pas être appropriée dans les situations suivantes :

1. Lorsque l'appui sur le membre résiduel n'est pas possible ou en présence de névromes douloureux ou sensibles.
2. En cas d'instabilité de l'articulation du genou.
Avec certaines formes de membres résiduels, telles que des membres très courts, fortement coniques ou présentant un tissu distal très mince.
3. Chez les patients incapables de suivre correctement les instructions de mise en place, de nettoyage et d'hygiène.
4. Chez les utilisateurs à très haut niveau d'activité (par ex. niveau K4 ou personnes pratiquant des sports à impact ou à forte charge), les contraintes mécaniques accrues pouvant dépasser les performances prévues du dispositif. L'adéquation doit être évaluée par un professionnel de santé au cas par cas.

Éléments à prendre en compte lors du choix de la protection adaptée au patient :

1. Les manchons en matériau plus souple (LNR-SIL-L-3-XX-30, LNR-SIL-C-3-XX-30, LNR-SIL-L-6-XX-30, LNR-SIL-C-6-XX-30) ne doivent être utilisés qu'avec des patients à faible niveau d'activité tels que K1 et K2. Le professionnel de la santé doit évaluer l'utilisation des manchons en matériau plus souple pour les patients à niveau d'activité K3 et K4 au cas par cas.
2. Les manchons transfémoraux (LNR-TF-SIL-L-2-XX-40) sont adaptés aux patients ayant un niveau d'activité de K1 à K3.
3. Des manchons en matériau plus ferme (LNR-SIL-L-3-XX-40, LNR-SIL-C-3-XX-40) peuvent être utilisés sur tous les types de patients, quel que soit leur niveau d'activité.

ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Ce produit doit être éliminé avec les ordures ménagères conformément à la réglementation nationale.

INFORMATIONS LÉGALES

Responsabilité

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant du non-respect du présent document, notamment en cas d'utilisation incorrecte, d'utilisation non prévue, d'utilisation en dehors des conditions spécifiées ou de modification non autorisée du dispositif. Le dispositif doit être entretenu conformément aux instructions d'utilisation. Une mauvaise utilisation ou un usage abusif peut entraîner une diminution des performances. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages résultant d'un entretien inadéquat ou de l'utilisation de composants non autorisés. La société de distribution du fabricant dans votre pays peut fournir des informations complémentaires sur les conditions de la garantie commerciale.

Garantie commerciale

Le fabricant accorde une garantie commerciale à compter de la date de mise en service du dispositif. La durée de la garantie est de 6 mois. Cette garantie couvre les défauts avérés de matériaux, de fabrication ou de construction. Ces défauts doivent être signalés au fabricant pendant la période de validité de la garantie commerciale. Des informations complémentaires sur les modalités et conditions de la garantie peuvent être obtenues auprès du fabricant.

Remarque : Bien que toutes les techniques avancées aient été mises en œuvre afin d'atteindre un niveau maximal de fonctionnalité, de résistance, de durabilité et de confort, aucune garantie ne peut être donnée quant au fait que l'utilisation de ce dispositif empêchera toute blessure.



Ethnocare Inc

Tel : +1 418-934-5669

Mail : admin@ethnocare.ca

240 Rue Saint-Jacques

Montréal, QC

Canada, H2Y 1L9